

NITRILO GENTLE TOUCH AZUL PRO



NITRILO

AZUL

SIN POLVO

S-XXL

AMBIDIESTRO

NO ESTÉRIL

Guante confortable. Ofrece protección frente a riesgos químicos específicos y disolventes en contacto esporádico. Entre sus usos destaca el alimentario, exploración-examinación sanitaria, laboratorio, higiene y limpieza, bricolaje etc.

Características:

No contiene proteína de látex, apto para alérgicos al látex	Texturado en su totalidad. Grosor especial
Azul oscuro, sin polvo, de un solo uso, ambidiestros	Alta resistencia y durabilidad.
Puño con reborde, protección frente a derrames.	Flexibilidad y Adaptabilidad

Presentación:

- Caja dispensadora de 100 unidades, con apertura troquelada para acceso higiénico al guante.
- Embalaje contiene: 10 cajas de 100 unidades
- Dimensión: 210 x 120 x 70 mm



Etiquetaje: Fecha de caducidad, fecha de fabricación, número de lote, Referencia, código de barras. Denominación del producto en varios Idiomas: español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano.

Marcado CE, Pictogramas de protección, Normas de seguridad y legislación. Talla y unidades, guía de tallas.

Normativa:

- Categoría III. Marca CE según Reglamento (UE) 2016/425
- Normativa alimentaria 10/2011 sobre materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
- ISO 16604:2004. Bacteriófago.
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018. Punto 7 EN 374-2. Punto 5 de la norma EN374-4
- EN ISO 374-5:2016
- EN420:2003+A1:2009. EN ISO 21420:2020
- EN455-1-2-3-4

RESISTENCIA QUÍMICA

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España

PERMEACIÓN. EN ISO 374-1:2016/A1:2018

Los guantes se clasifican en términos de tiempo de paso, según cada producto químico individual para el que el guante resiste la permeación.

Los guantes son ensayados frente a los siguientes productos químicos:

QUÍMICOS	NIVEL	LETRA
N-HEPTANO	6	J
HIDRÓXIDO SÓDICO 40%	6	K
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO 30%	6	P

Niveles de prestación:

Tiempo de paso (min)	> 10	> 30	> 60	> 120	> 240	> 480
Nivel de prestación	1	2	3	4	5	6

DEGRADACIÓN

Se determina el % de degradación (DR) para cada producto químico realizado en la permeación.

(DR) K: Hidróxido sódico 40% = -50.99%

(DR) J: n-Heptano= 52.01%

(DR) P: Peróxido de Hidrógeno 30% = 37.91%

El EPI tipo GUANTE DE NITRILO “GENTLE TOUCH PRO” debe utilizarse para proteger la mano del usuario contra riesgos químicos (productos y niveles anteriormente mencionados) y contra riesgos microbiológicos (bacterias, hongos y virus).

Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos. Debe evaluarse el uso de este EPI correctamente dependiendo del lugar de trabajo.

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo B EN ISO 374-5:2016



J K P



VIRUS



0161

CAT III

RUBBEREX SPAIN S.L


NITRILO GENTLE TOUCH AZUL PRO



Dimensiones del Guante	S	M	L	XL
ANCHO DE PALMA	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGITUD	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Grosor palma mm (± 0.02)	0.12	0.12	0.12	0.12
Grosor dedo mm (± 0.02)	0.13	0.13	0.13	0.13
Grosor puño mm (± 0.02)	0.08	0.08	0.08	0.08
Peso gr. (± 0.3)	4.4	4.6	5.0	5.4

REF	Color	Talla	T. numérica	EAN
0504	Azul	S	7	8435234005040
0505	Azul	M	8	8435234005057
0506	Azul	L	9	8435234005064
0507	Azul	XL	10	8435234005071
0503	Azul	XXL	11	8435234005033

Dispensador

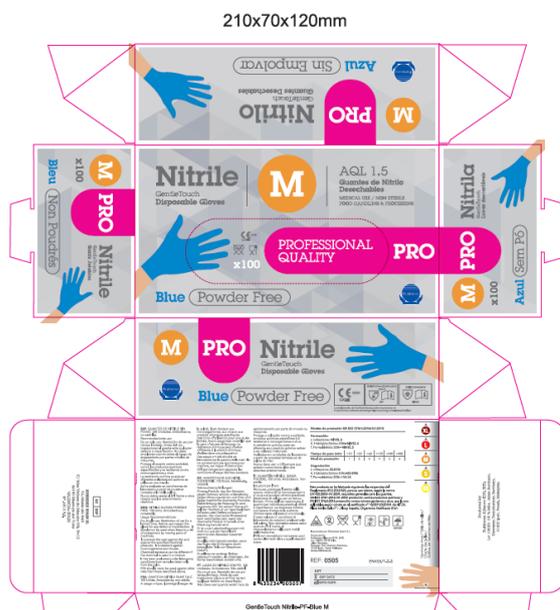

Logística:

Dispensador: 100 guantes

Caja: 10 dispensadores por caja

Pallet: 63 cajas

Rev 023.2024

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Polígono Industrial Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valencia. España